

Multi Hudpleieapparat 364

Art.nr: 100F-364



Multifunksjonelt hudpleieapparat med 5 funksjoner:

- Cold/Hot hammer
- Høyfrekvens
- Frimator
- Galvanisk
- Spray/ Vacuum

Funksjoner:

Cold/Hot hammer:

Den varme siden av hammeren gir en avslappende effekt, og åpner porene, samtidig som den stimulerer blodsirkulasjonen. Den kalde siden lindrer trøtt og overopphetet hud, og lukker porene samtidig som fuktigheten "låses" inn i huden.

Høyfrekvens:

Behandlingen minimerer og forhindrer akne, samt at den reduserer store porer, hovne øyne, mørke ringer og forekomsten av fine linjer og rynker.

Frimator:

Den roterende børsten brukes til å fjerne døde hudceller, smuss, olje og skitt som fester seg til hudoverflaten. Den roterende børsten skaper også en behagelig massasje for din klient.

Galvanisk:

Behandling gir ingredienser muligheten til å penetrere hudens overflate, og er derfor nyttig for innsuling av produkter og en dypere rens. Galvanisk behandling passer til en uren, aldrende og fet hud.

Spray/ Vacuum:

Enheten stimulerer blodsirkulasjonen, forbedrer hudens metabolisme og hjelper med å fjerne urenheter.

Multi Hudpleieapparat 364



Art.nr: 100F-364



Funksjoner

1. Spray
2. Vakuum
3. Galvanisk
4. Frimotor
5. Høyfrekvens
6. Varm og kald hammer

Panel bak

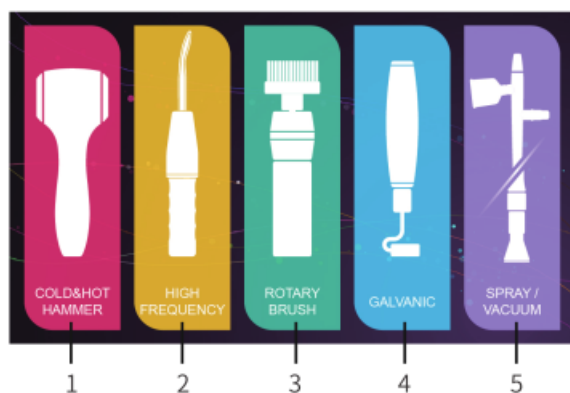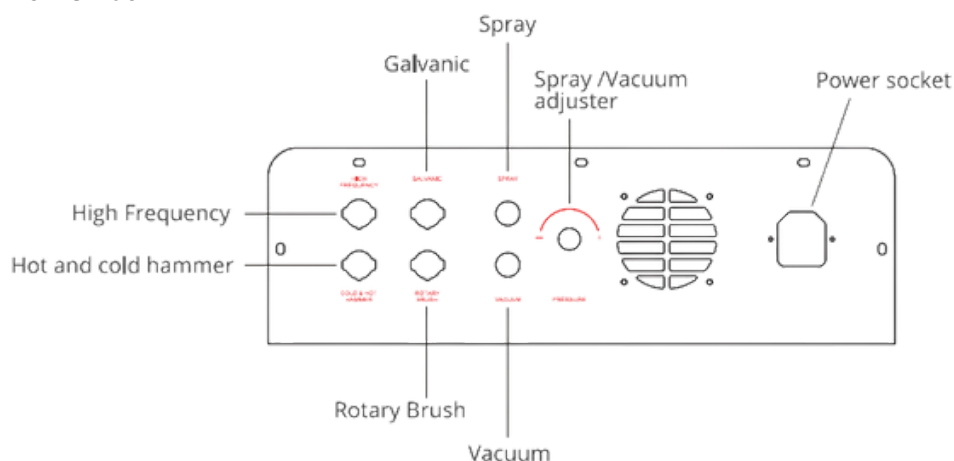

Frontpanel

Klikk for å velge ønsket behandlingsapparat på displayet, og maskinen vil åpne innstillinger for valgt apparat:

1. Varm og kald hammer
2. Høyfrekvens
3. Frimotor
4. Galvanisk
5. Spray/Vakuum

Multi Hudpleieapparat 364

Art.nr: 100F-364


Produkt parametere

Produktmodell	F-364
Spennings/frekvens	AC 100-240V, 50/60Hz
Effekt	60 W
Nettovekt	6.3 kg
Produktstørrelse	37x31.5x16.5 cm
Pakkestørrelse	56.8x52.5x23.5 cm
Pakkeinnhold	Hovedenhet x 1
	Tilbehørshyller x 1
	Varm og kald hammer x 1
	Høyfrekvensprobe (inkludert 4 typer) x 1
	Roterende børste (inkludert 4 typer) x 1
	Galvanisk probe x 1
	Vakuumpumpe (inkludert 3 glassug) x 1
	Sprayenhet x 1
	Skrutrekker x 1
	Skrue (M4) x 1
	Bruksanvisning x 1
	Strømledning x 1

Multi Hudpleieapparat 364

Art.nr: 100F-364

Varm og kald hammer

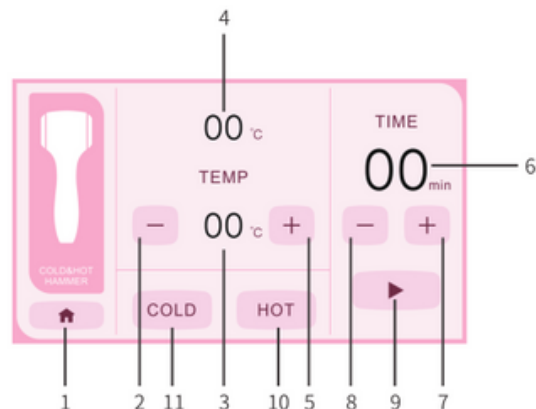

1. Tilbake til start-display.
2. Temperatursenkingsknapp:
Kjøletemperatur: 5°C- 25°C
Varmetemperatur: 25°C - 45°C
3. Temperaturvisning: Når du velger kjølemodus/ varmemodus, vises valgt temperatur.
4. Faktisk temperatur på varme- og kuldehammer: Når kjølemodusvarmemodus er valgt, vises faktisk temperatur på hammeren.
5. Temperaturøkingsknapp:
Kjøletemperatur: 5°C- 25°C
Varmetemperatur: 25°C - 45°C
6. Tidsvisning: Arbeidstiden starter nedtellingen når den er i drift. Maskinen stopper automatisk når tiden viser null.
7. Øke arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
8. Redusere arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
9. Start /Pause.
10. Varmemodus.
11. Kjølemodus.

Operasjonsmetode

1. Velg kjølemodus eller varmemodus.
2. Innstilling av arbeidstemperatur og arbeidstid. Maksimal tid kan settes til 30 minutter.
3. Ta ut varme- og kuldehammeren og slå på håndtakbryteren.
4. Trykk på startknappen for å starte funksjonen.
5. Sjekk og bekreft om displaytemperaturen samsvarer med innstillingstemperaturen. Hvis ja, ta på og føl på din egen hud. Du kan bruke den direkte hvis temperaturen kjennes bra, ellers juster du den igjen.
6. Hammeren stopper automatisk når den planlagte tiden er over. Rengjør den og legg den tilbake på tilbehørshyllen.

Anbefalt brukstid

1. Juster ut i fra hudens behov, normal behandlingstid er 10-15 minutter.

Denne funksjonen skal ikke brukes på følgende klienter/ tilstander:


1. Pasienter med tilbakevendende arrutslett og allergier.
2. Brannskader, skåldinger, solflekker, betennelser eller andre sår.
3. Personer som lider av immundepende sykdommer som resulterer i lav immunitet, eller bruker immunsuppressive medisiner.
4. Ved operasjons de siste 3 månedene.

*Ikke forlat klienten når hammeren er i bruk og i kontakt med huden.

Multi Hudpleieapparat 364

Art.nr: 100F-364

Høyfrekvens

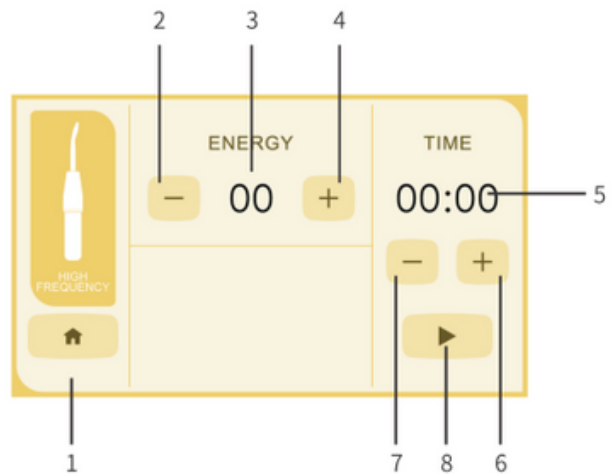

1. Tilbake til start-display.
2. Redusere energinivå: Energinivå: 1-10.
3. Energinivåvisning.
4. Øke energinivå: Energinivå: 1-10.
5. Arbeidstidsvisning: Arbeidstiden starter nedtellingen når den er i drift. Maskinen stopper automatisk når tiden viser null.
6. Øke arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
7. Redusere arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
8. Start /Pause.

Operasjonsmetode

1. Velg energinivå og arbeidstid, den lengste innstillingen er 30 minutter.
2. Ta ut håndtaket og installer kolben du ønsker å bruke.
3. Trykk på startknappen for å aktivere funksjonen.
4. Etter planlagt slutt, stopper tilbehøret å fungere. Ta ut kolben, rengjør og tørk av kolben, og legg den deretter håndtaket tilbake på tilbehørshyllen.

Anbefalt brukstid

1. Fet hud: anbefalt å bruke 10-15 minutter.
2. Tørr og dehydrert hud: anbefalt å bruke 3-5 minutter.


Denne funksjonen skal ikke brukes på følgende klienter/ tilstander:

1. Gravid kvinner, og de som er utstyrt med pacemaker, spiral o.l
2. Personer med karsykdommer og høy hudfølsomhet.
3. Ved metallimplantater, metallproteser og piercing.
4. Personer med hudsår, solbrent hud og andre tilstander.
5. Kroppsdeler med tykt hår.
6. Ikke bruk hudkremer som inneholder alkohol, da alkohol er svært brannfarlig. Hvis det kreves alkoholbaserte toner, påfør det kun etter bruk av disse produktene.
7. Behandlingstiden for hvert område bør ikke overstige 5 sekunder.
8. Merk: Ikke ha kolben i kontakt med fukt.

Multi Hudpleieapparat 364

Art.nr: 100F-364

Roterende børste

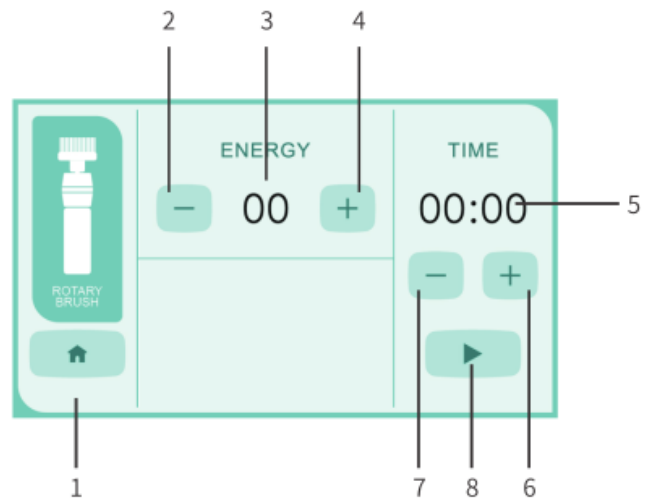

1. Tilbake til start-display.
2. Redusere energinivå: Energinivå: 1-10.
3. Energinivåvisning.
4. Øke energinivå: Energinivå: 1-10.
5. Arbeidstidsvisning: Arbeidstiden starter nedtellingen når den er i drift. Maskinen stopper automatisk når tiden viser null.
6. Øke arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
7. Redusere arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
8. Start /Pause.

Operasjonsmetode

1. Sett energinivå og arbeidstid, den lengste innstillingen er 30 minutter.
2. Ta ut tilbehøret og installer børstehodet som trengs.
3. Trykk på startknappen for å begynne.
4. Etter planlagt slutt, stopper tilbehøret å fungere. Rengjør tilbehøret og legg det tilbake på tilbehørshyllen.

Anbefalt brukstid

1. Juster varigheten i henhold til hudens spesifikke forhold. Generelt bør ikke varigheten overstige 10 minutter.


Denne funksjonen skal ikke brukes på følgende klienter/ tilstander:

1. Ikke bruk under øynene.
2. Allergiske klienter.
3. Brannskader, skålding, solbrenthet, betennelse eller andre sår.

Multi Hudpleieapparat 364

Art.nr: 100F-364

Galvanisk rulle og håndholdt stang

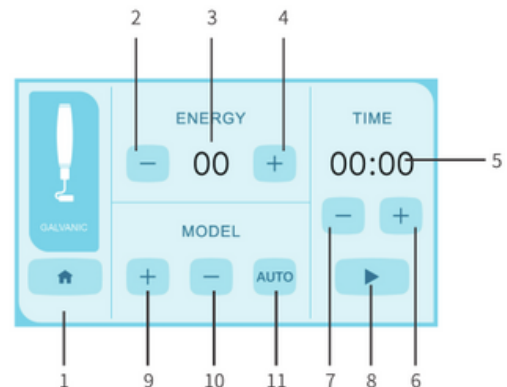

1. Tilbake til start-display.
2. Redusere energinivå: Energinivå: 1-10.
3. Energinivåvisning.
4. Øke energinivå: Energinivå: 1-10.
5. Arbeidstidsvisning: Arbeidstiden starter nedtelling når den er i drift. Maskinen stopper automatisk når tiden viser null.
6. Øke arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
7. Redusere arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
8. Start /Pause.
9. Positiv mikrostrøm utgangsmodus: Utgang positiv mikrostrømsignal.
10. Negativ mikrostrøm utgangsmodus: Utgang negativ mikrostrømsignal.
11. Blandet utgangsmodus veksler periodisk mellom positiv og negativ mikrostrøm utgang.

Operasjonsmetode

1. Sett energinivå og arbeidstid, den lengste innstillingen er 30 minutter.
2. Velg modus.
3. Ta ut rullen og stangen. La klienten holde stangen i sin hånd.
4. Trykk på startknappen for å begynne.
5. Etter endt arbeidstid, rengjør tilbehøret og legg det tilbake på tilbehørsstativet.

Anbefalt brukstid

1. Varighet for innsusning: Anionisk drift i 2 minutter, deretter kationisk drift i 6 minutter;
2. Avkalkningspleie varighet: Anionisk drift i 6 minutter, og katjonisk drift i 2 minutter.

Galvanisk brukes til behandlinger som lontofores og desinkrustasjon.

Ved lontofores brukes galvanisk til å transportere elektrisk ladede partikler, ioner. Disse sluser aktive substanser ned i huden, gjennom geleer/serum som er positivt (kationer) eller negativt (anioner) ladet.

Produktet kan også være både positivt og negativt ladet. Produktet må kunne spaltes i ioner.

Ved desinkrustasjon kan vi få produkter til å løse opp og trekke til seg tilstopninger, som vil gi en effektiv dyprens. Den øker også blodsirkulasjonen, noe som igjen gir en rensende effekt. Ved desinkrustasjon brukes alltid negativ polidaritet, katode.


Denne funksjonen skal ikke brukes på følgende klienter/ tilstander:

1. Gravid kvinner, og de som er utstyrt med pacemaker, spiral o.l
2. Personer med karsykdommer, allergi, svulst og høy hudfølsomhet.
3. Ved metallimplantater, metallproteser og piercing.
4. Personer med hudsår, solbrent hud, utvidede kapillærer og andre tilstander.

Multi Hudpleieapparat 364

Art.nr: 100F-364

Spray og vakuum

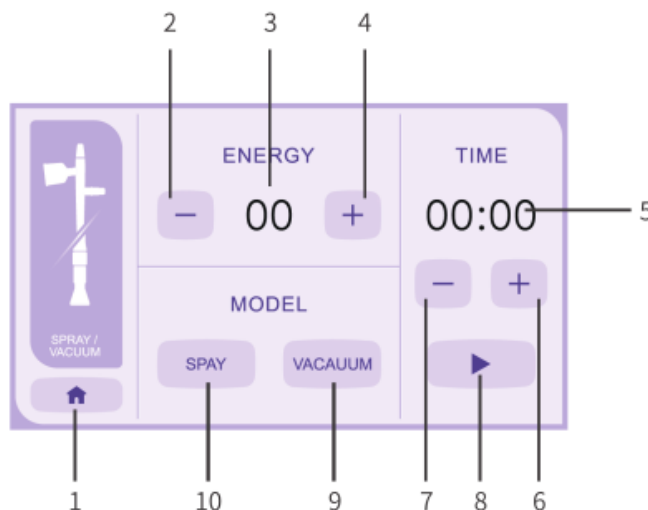

1. Tilbake til start-display.
2. Redusere energinivå: Energinivåområde: 1-10.
3. Energinivåvisning.
4. Øke energinivå: Energinivå: 1-10.
5. Arbeidstidsvisning: Arbeidstiden starter nedtellingen når den er i drift. Maskinen stopper automatisk når tiden viser null.
6. Øke arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
7. Redusere arbeidstid: Arbeidstid: 1-30 minutter.
8. Start /Pause.
9. Vacuummodus
10. Spraymodus

Operasjonsmetode

1. Velg spray eller sugefunksjon. Hvis du bruker spray, må du være oppmerksom på om vannvolumet i vannflasken er tilstrekkelig.
2. Sett energinivå og arbeidstid, den lengste innstillingen kan være 30 minutter.
3. Ta ut tilbehøret og velg ønsket hode.
4. Trykk på Start-knappen for å bruke.
5. Etter slutten av arbeidstiden, rengjør tilbehøret og legg det tilbake på tilbehørshyllen.

Anbefalt brukstid

1. Under normale omstendigheter bør kontinuerlig driftstid for vakuum og spray ikke overstige 10 minutter.

Denne funksjonen skal ikke brukes på følgende klienter/ tilstander:

1. Brannskader, skåldinger, solbrent hud, betennelser eller andre sår.
2. Unngå huden rundt øynene.